


MYTREX

取扱説明書

MED/CAG LC EGG

家庭用電気マッサージ器

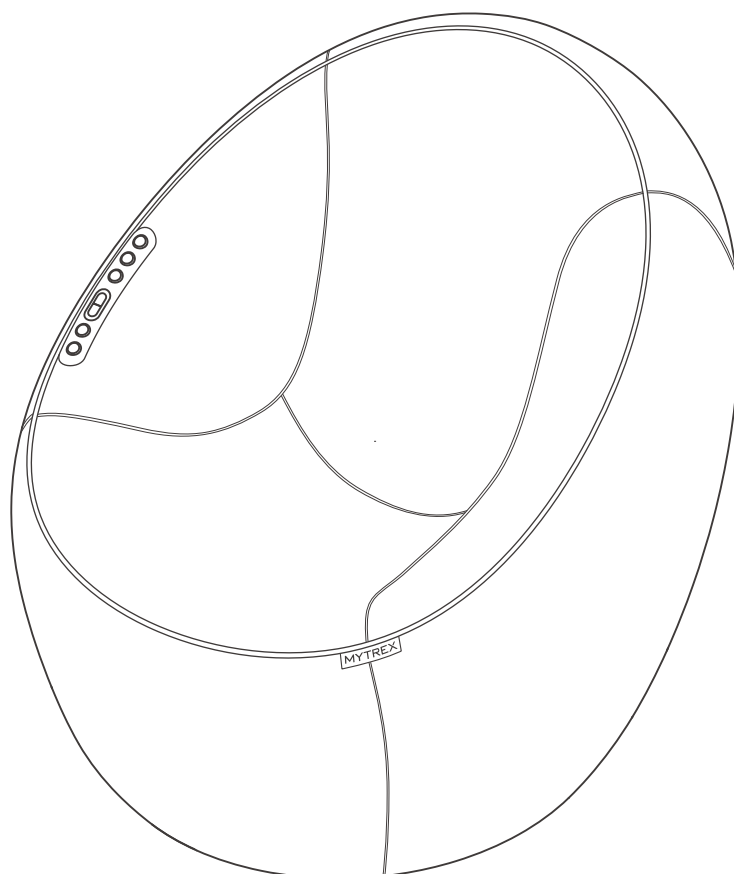

保管用

保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。

この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになった後も、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止しカスタマーサポートへお問い合わせください。故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

ご使用になる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

警告表示について：誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。



危険

誤った使い方をすると、「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容を示しています。



禁止

してはいけない「禁止」内容を示しています。



警告

誤った使い方をすると、「死亡や重傷を負うおそれがある」内容を示しています。



必ず守る

必ず実行して頂く「強制」内容を示しています。



注意

誤った使い方をすると、「傷害を負う可能性や物的損害が発生するおそれがある」内容を示しています。



危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器



警告



禁止

視覚障害のある方は1人で使用しない。

けがや体調不良の原因になります。

次のような方は使用しない。

事故や肌・身体のトラブルの原因になります。

- 心臓疾患のある方、血栓のある方
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- 乳幼児や子ども
- 妊娠中、または妊娠の可能性のある方
- 医師にマッサージを禁じられている方
例) 血栓症、塞栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症
(皮下組織の炎症を含む。) など
- 骨折、整形などで使用部位に埋め込み手術を受けた方
- 飲酒している方



警告



禁止

次の部位には使用しない。

肌・身体トラブルの原因になります。

- 整形手術をした部位
- 皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
- 皮膚トラブルのある部位
- 痛覚、知覚障害を起こしている部位
- 背中、腰以外の部位

他の治療器との同時使用や、塗り薬（スプレー式などを含む）との併用はしない。
事故やけが、体調不良の原因になります。

体調が優れないときや、眠気がある時、飲酒時や、食後すぐは使用しない。
また、飲食・喫煙・運転をしながら使用しない。
事故やけがの原因になります。

小さな子供に使用させない。本製品で遊ばせない。ペットには使用しない。
事故やけが、体調不良の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、定格容量以外での使用はしない。
破損・発火の原因になります。

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば）で保管・使用しない。
加熱したり、火中に投下しない。
発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。

本体のカバーを故意にはずしたり、破いたり、切ったりしない。破れがある場合は使用しない。
事故やけがの原因になります。

本体や付属品の差込口、すきまなどにピン、異物、ゴミ、水分を付着させない。
感電やショート、発火の原因になります。

電源コードを本体などに巻き付けない。
コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。

ACアダプターおよび電源コードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。
また、重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
感電、ショート、発火、故障の原因になります。

電源コードを抜くときは、先端部分を持ちコードを引っ張らない。
感電やショート、発火の原因になります。

付属のACアダプター以外は使用しない。付属品は他の製品には使用しない。
故障や事故の原因になります。

ACアダプターおよび電源コードが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。
感電やショート、発火の原因になります。

警告



ぬれ手禁止

濡れた手で本体や電源プラグ、リモコンに触れない。
感電やショート、発火の原因になります。



水場禁止

本体および付属品に水をかけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で使用・保管しない。
火災、感電、故障、カビ、サビの原因になります。



分解禁止

分解や修理、改造をしない。
発火したり、故障や事故の原因になります。



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。
事故やけが、体調不良の原因になります。
下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 悪性腫瘍のある方
- 血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
- 薬を服用中の方
- 生理中の方、出産直後の方
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- 皮膚に創傷や湿疹、はれものなど異常ある方
- 安静を必要とする方、四肢の不自由な方
- 体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状[けん怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期にある方、衰弱している方)
- 体調不良、身体に異常を感じている方
- 骨折、骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性疾患(疼痛性)のある方
- 背骨に異常のある方、背骨が左右に曲がっている方
- 腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアの方
- 医療機関で治療中の方
- かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方
- 体力が極端に衰えた方
- 神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方

本機器はヒーターを内蔵しており、使用中に表面が熱くなるため、熱に敏感でない方は十分注意を払って使用する。下記に該当する場合は特に注意する。

低温やけどや脱水症状の原因になります。

- お年寄り、ご病人、ご自分で操作ができない方
- 皮膚の温感(温度感覚)の弱い方
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方
- 血行障害(糖尿病など)の方
- 医師より注意を受けている方

警告



使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。
医師に相談のうえ指示に従ってください。

必ず守る

使用前には、必ずマッサージ部のカバーやその他の部分が破れていないか確認する。
破れがあった場合は、小さな破れでも直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、
カスタマーサポートに連絡する。

カバーが破れたり外した状態で使用すると、感電やけが、衣服や髪が巻き込まれる
おそれがあります。

本製品を使用するときは、使用部位から金属などの硬いもの、アクセサリー、ベルト類を
外す。また、マフラーなどは外して使用する。

事故やけがの原因になります。

しばらく使用しても効果が表れない場合は、使用を中止し医師または専門医に相談する。
体調不良の原因になります。

電源プラグはタコ足配線にせず、壁のコンセントに直接根元まで差し込む。
火災・感電・故障の原因になります。



電源プラグ を抜く

本体および付属品から異臭・異音・異常発熱・煙が発生した場合、内部に水などの異物が
入り込んだ場合は、直ちに使用を中止しコンセントから電源プラグを抜く。
発火・破損の原因になります。

⚠ 注意



禁止

家庭用マッサージ器以外の用途には使用しない。また、頭やけい部へは使用しない。
事故やけが、故障の原因になります。

本体の座部や背部に立ったり、本体側面に寄りかかったりしない。
座面に勢いよく腰を下ろさない。
転倒による事故やけが、故障の原因になります。

同一箇所に過度に集中して使用しない。
事故やけが、体調不良の原因になります。同一箇所への使用は3分以内を目安にして
ください。

強く押しつけて使用しない。
事故やけが、体調不良の原因になります。

もみ玉やたたきガン玉に素肌を当てない。また、可動部に手や足をはさまない。
事故やけがの原因になります。

ヒーターは長時間使用しない。同一箇所に長時間触れるような使い方をしない。
また、長時間布団などをかけて使用しない。
低温やけどや脱水症状の原因になります。比較的低い温度(40～60℃)でも、
長時間皮膚の同じ箇所に触れていると低温やけどになるおそれがあります。

体重が過度に本体にかかるような使用はしない。
事故やけが、故障の原因になります。

本体に2人以上乗らない。
故障やけがの原因になります。

使用中は眠らない。
体調不良やけがの原因になります。

使用中は、電源プラグや操作ボタンを使用者以外に触らせない。
けがや思わぬ事故の原因になります。

本体を倒したり、強い衝撃を与えない。
故障やけがの原因になります。



電源プラグ を抜く

お手入れする際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で行う。
火災や事故の原因になります。

停電したときや雷が鳴り始めたら、直ちに電源プラグをコンセントから抜く。
火災や感電、故障の原因になります。

注意



必ず守る

水平な場所で使用する。
故障や事故、けがの原因になります。

ご使用前に、本体に異物が挟まっていないか確認する。
事故やけがの原因になります。

ご使用前に、各操作ボタンおよびタイマー（10分間）が正常に動作するか確認する。
動作不良があると、事故やけがの原因になります。

もみ玉が収納位置にあることを確認してから、ゆっくり座る。
事故やけがの原因になります。

1回の使用時間は10分以内とし、1日2回までを限度として使用する。
筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、けがをまねくことがあります。
なお、複数の方が使用する場合は、連続使用の合計時間を20分以内としてください。
連続使用後は最低20分以上機器を停止させてから再度ご使用ください。
本体が熱くなって、故障の原因になります。

慣れないうちは遅めの振動スピードおよび短時間から使用する。
強い刺激に慣れていないとけがの原因になります。

故障や不具合が生じた場合は、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートに相談する。
お客様ご自身では分解や修理などをしないでください。保証の対象外となります。

ご使用後は、本体の電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。
子供のいたずらなどによる事故の原因になります。

セット内容

万一、セット内容に不足がございましたら、カスタマーサポートまでご連絡下さい。


本体	MYTREX メディカグ EGG26	1台
付属品	ACアダプター	1個
	取扱説明書	1部
	添付文書	1部

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。


※デザインおよび仕様については、予告なしに変更することがございます。

各部の名称


本体

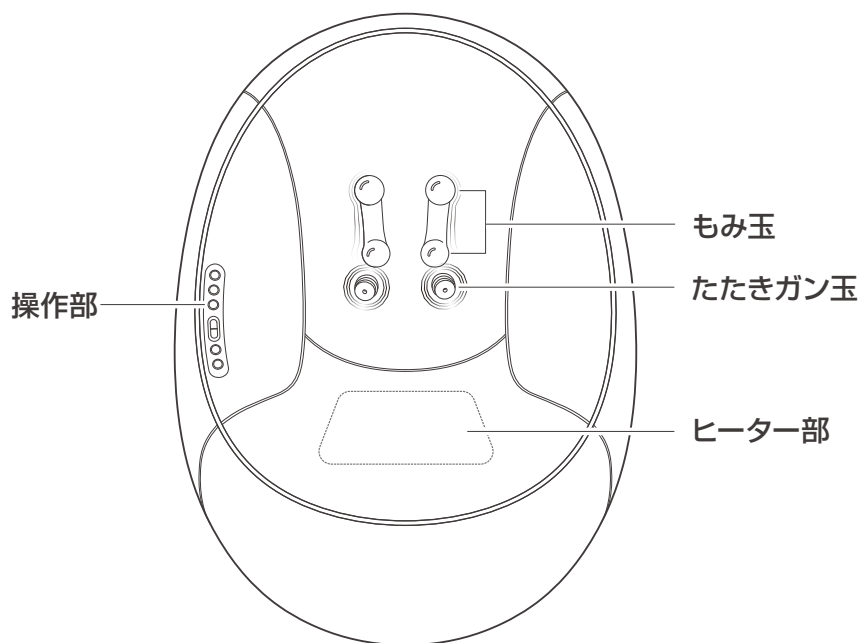

本体側面

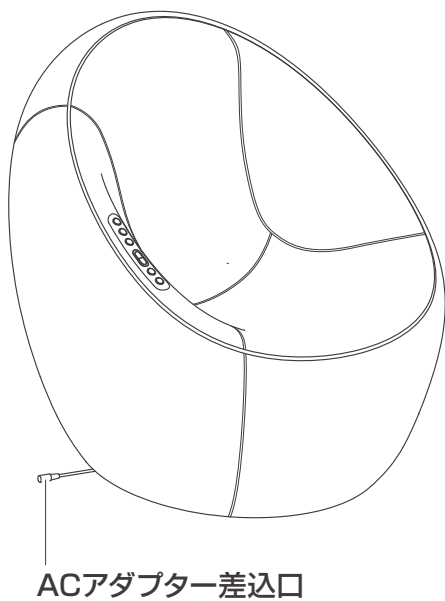

付属品

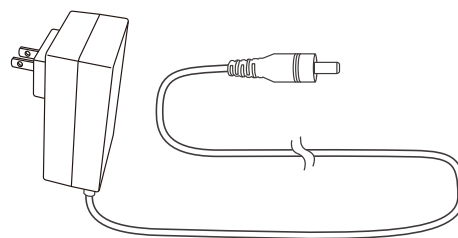

ACアダプター

操作部と各機能

操作部

電源ランプ
(白)

急停止ランプ
(赤)

振動レベルランプ
(白)

もみ速度ランプ
(白)

ヒートランプ
(橙)

ヒートボタン

ヒート機能をオン/オフにします。

※オンになると、ヒートランプが点灯します。

電源ボタン

長押しで、電源をオン/オフにします。

急停止ボタン

△ボタン/▽ボタン

押すとオートモード(上下移動+もみ)を停止し、スポットたたきを開始します。

長押しするとたたき位置を上下に移動します。ボタンから手を離すと選択した位置でたたきを行います。

※もみは停止し、たたきのためのマッサージを行います。
※たたきで振動レベル0(振動なし)が選択されているときはマッサージは行いません。マッサージをする場合は、たたきボタンを押してレベル1以上を選択してください。

たたきボタン

ガン玉たたきの振動レベルを設定します。

ボタンを押すたびに振動レベルが切り替わります。

振動レベル	振動レベルランプ	1分間当たりの回転数
レベル0	消灯	0
レベル1	● ○ ○	670
レベル2	● ● ○	1020
レベル3	● ● ●	1470

振動なし

ゆっくり



速い

もみボタン

オートモード(上下移動+もみ)時に、もみ速度を設定します。

ボタンを押すたびに速度が切り替わります。

※スポットたたきモードを選択中に押すと、オートモード(上下移動+もみ)に切り替わります。

もみ速度	もみ速度ランプ
低速	● ○
高速	● ●

はじめにお読みください

初回で使用前や、しばらく使用していなかった場合は、各操作ボタンおよびタイマー(10分間)が正常に動作するか確認してください。

異常が発見された場合はそのまま使用せず、カスタマーサポートにご相談ください。

本製品は、あんま、マッサージの代用を目的としており効果の表示が認められています。

使用目的または効果

疲労の回復

血行の促進

筋肉の
疲れをとる

筋肉の
こりをほぐす

神経痛・
筋肉痛の痛みを
やわらげる

※一般家庭で使用する。※上記以外の目的には使用しないでください。

設置方法

箱から出す前に設置場所をあらかじめ決めてください。

コンセントの近くに設置してください。

搬入幅: 約73cm

製品寸法: 横幅約700mm×高さ約730mm×奥行約820mm

設置方法

⚠ 注意

- ・本体を移動する前に、ACアダプターを本体およびコンセントから外してください。故障や事故の原因になります。
- ・本体を持ち上げる際は、両手で本体をしっかりと持ち上げて移動してください。破損や落下の原因になります。
- ・足元に十分注意して、ゆっくり慎重に運んでください。
- ・人を載せて移動しないでください。事故やけがの原因になります。
- ・フローリングや畳など傷つきやすい床面で、引きずったり移動をさせたりしないでください。床面に傷がつく恐れがあります。



1


本体を設置する。

- ※周囲に障害物のない、フローリングや床の上に設置してください。
- ※ホットカーペットの上でのご使用はおやめください。
- ※やわらかい床や畳で使用する際は、傷を防止するために本体の下にマットなどを敷くことをおすすめします。

2

本体のACアダプター差込口にACアダプタープラグを接続し、コンセントに電源プラグを根元までしっかりと挿し込む。

- ※正確に、確実に差し込むように注意してください。
- 電源ランプが1回点滅します。
もみ玉が収納位置に無い場合は、収納位置に移動します。この間、急停止ボタン以外は操作ができません。

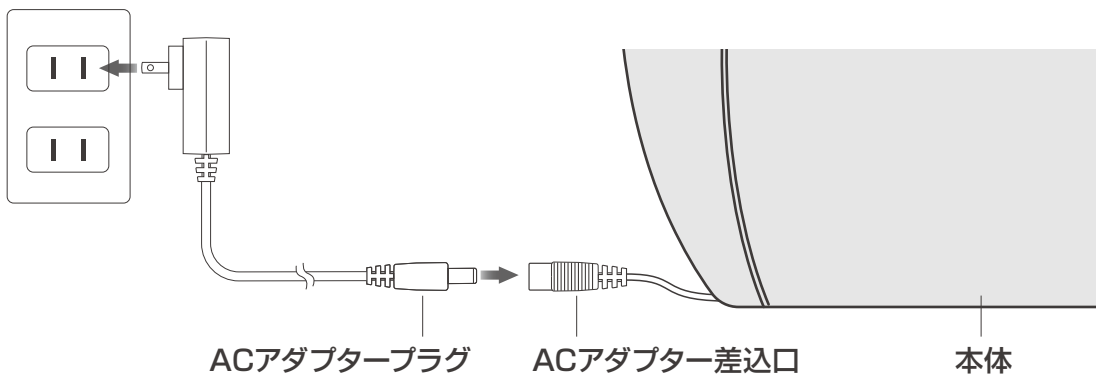

ご使用方法

1 電源がオフになっていることを確認してから、本製品の座部に深く座る。


※本体背部に体重が過度にかかるような使用はしないでください。
圧力をかけすぎると、保護のために電源がオフになります。再度
使用する場合は、電源をオンにしてください。

2 本体操作部の電源ボタン(⏻)を長押ししてオンにする。

●電源ランプが数秒間点滅した後に点灯し、以下のデフォルトで動作を開始します。

※電源オフから3分以内に再起動した場合は、ランプの点滅なく、すぐに動作を開始します。

モード	オート(上下移動)
たたき振動レベル	レベル1
もみ速度	低速
ヒート	オフ

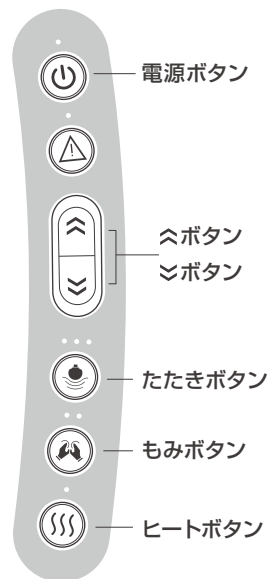

3 ガン玉たたきの振動レベルを調整するには、たたきボタン(🌀)を押す。

※振動レベルは3段階から選択することができます。

ボタンを押すたびに「レベル1→レベル2→レベル3→オフ→レベル1…」の順に切り替わります。

4 もみ速度を調整するには、もみボタン(👣)を押す。

※もみ速度は低速、高速から選択することができます。

ボタンを押すたびに速度が切り替わります。

5 ヒート機能をオンにするには、ヒートボタン(🔥)を押す。

※ボタンを押すたびに、オン/オフが切り替わります。

6 スポットたたきモードを選択するには、△ボタン/▽ボタンを押す。

●オートモード(上下移動+もみ)を停止し、同一箇所でのたたきだけのマッサージを行います。

※たたきで振動レベル0(振動なし)が選択されているときはマッサージは行いません。

マッサージをする場合は、たたきボタンを押してレベル1以上を選択してください。

※スポットたたきモード使用中に、最下部へとたたきガン玉を移動すると、十分な体感を得られない場合があります。たたきガン玉を、心地よい刺激が得られる位置に移動してご使用ください。

※スポットたたきモードを選択中にもみボタンを押すと、オートモード(上下移動+もみ)に切り替わります。

ご使用方法

7

スポットたたきモードで位置を移動するには、
△ボタン/▽ボタンを長押しする。

※ボタンから手を離すと選択した位置でたたきを行います。

8

途中でマッサージを終了する場合は、
電源ボタン(○)を長押ししてオフにする。

※操作部の電源ランプが点滅しながら、もみ玉がゆっくり収納位置に移動し、
マッサージが停止して電源がオフになります。

※動作開始から10分間が経過すると自動で電源がオフになります。

緊急時や動作中に機器や体に異常を感じたときは！

急停止ボタンを押します。マッサージが停止し、急停止ランプが赤色に点滅します。

急停止状態をリセットするために、電源ボタンを長押ししてください。

電源ランプが白色に点滅しながら、もみ玉が収納位置に戻り電源がオフになります。

※急停止ボタン押下後リセットされるまで、急停止ランプは赤色に点滅します(停電や電源プラグを抜いた場合を除く)。



9

使用後はACアダプターをコンセントから抜く。

※子供のいたずらなどによる事故の原因になります。

使い方のヒント

全モードを 同時に使う

1. もみボタン(🌀)を押して、高速または低速を選択します。
2. たたきボタン(🔴)を押して振動レベルを選択します。
3. ヒートボタン(🔥)を押してオンにします。

たたき機能 だけを使う

1. △ボタン/▽ボタンを押してスポットたたきモードを選択します。
- ※たたき機能のみで使用する場合は、自動で上下移動はしません。

もみ機能 だけを使う

1. たたきボタン(🔴)を押して、振動レベル0(振動なし)を選択します。

ヒート機能 だけを使う

1. △ボタン/▽ボタンを押してスポットたたきモードを選択します。
2. たたきボタン(🔴)を押して、振動レベル0(振動なし)を選択します。
3. ヒートボタン(🔥)を押してオンにします。

お手入れ・保管・廃棄方法

お願い

長くお使いいただくために次のことをご注意ください。

- お風呂上がりなど、体が汗ばんだ状態で使用しないでください。
- 整髪料や化粧品をご使用の場合は、触れる部分にタオルなどを敷いてください。化学変化による生地の変色や劣化の原因になります。
- ジーンズや色柄ものなど、色落ちしやすい衣類での使用はしないでください。合成皮革部・布地部への色うつりの原因になります。
- ビニール製品や壁紙に長時間接触させないでください。生地が変色する原因になります。

お手入れ方法

- 定期的にお手入れを行ってください。
- 必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。
- 本体および付属品は絶対に水洗いしないでください。
- 乾いたやわらかい布で本体の汚れをふき取ってください。
- 汚れが気になる場合は、ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よくしぼってから本体表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。その後、乾いた布で乾ぶきをしてください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

保管方法

- 使用後は本体の電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いて保管してください。
- 電源コードがねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。
- 汚れやホコリが付着しないよう、カバーなどをかけて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所、本製品でつまづくような場所での保管はおやめください。

廃棄について

- 廃棄する際は、各自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

故障かな?と思ったら

お問い合わせの前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートにご連絡ください。絶対に分解したり、修理や改造はしないでください。

症状	確認していただくこと
電源を入れても動かない	●本体、ACアダプターが正しく接続されているか確認してください。
マッサージが強い	●たたき振動レベル0(振動なし)にして、もみ機能(低速)のみでのマッサージをお試しください。 ●背もたれ部にひざ掛けなどを掛けてください。
異音がする	●本体の周辺に接触しているものがないか確認してください。 ●本製品は、構造上、ある程度の動作音がするため異常ではありません。
突然停止した	●タイマーにより開始から10分で停止します。 ●連続して使用していませんか？ ・振動レベルランプ/もみ速度ランプが点滅している場合、内部の温度上昇により、安全装置が働いてたたき/もみ機能が停止しています。再度使用できるようになるまで、1時間程度、本体を停止させてください。(1時間以上かかる場合もあります。) ・ヒートランプが5回点滅後に消灯し、ヒート機能が停止した場合、モーターの温度上昇のため安全装置が働きます。再度使用できるようになるまで、1時間程度、本体を停止させてください。 ●無理な力がかかっていませんか？ - 背部に無理な力がかかると安全装置が働き止まることがあります。電源プラグを差し直し、もう一度操作しなおしてください。

製品仕様

ブランド	MYTREX (マイトレックス)
販売名	MYTREX メディカグ EGG26
型番	MT-MCE-25M
本体定格	動作時 24V ≒ 48W(ヒーター:6W) ACアダプター接続時 100V～ 50/60Hz 48W
ACアダプター	入力:100V～ 50/60Hz 1.5A 出力:24V≒ 2A (型番:EA060-2400-2000WJ)
サイズ	約700mm×730mm×820mm
質量	約8kg(ACアダプターを除く)
素材	ABS樹脂、ポリエステル
電源コード長	約1.8m
使用環境	温度:5℃～35℃、相対湿度:≤90%RH
適応体重	最大90kg
振動機能	L1: 670回±10%/分 L2: 1020回±10%/分 L3: 1470回±10%/分
揉み機能	揉み回転数:[高速]28±3回/分、[低速]19±3回/分
定格時間	10分
一般的名称	家庭用電気マッサージ器(JMDNコード:34662000)
医療機器の種類	管理医療機器
医療機器認証番号	308AHBZX00020000
製造販売元	株式会社 創通メディカル
製造国	中国