

NITREX EYE+

取扱説明書

このたびは本製品をお買上げいただき、
誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。
この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

ご使用前に必ずご確認ください

万が一、セット内容に不足がございましたら、カスタマーサービスまでご連絡下さい。

セット内容

- 本体(グラフェンホットアイマスク) 1台
- 充電池 1台
- USBコード 1本
- 取扱説明書 1部

※デザインおよび仕様については、予告なしに変更することがございます。

安全上のご注意



警告

次の人は使用しないで下さい。

- 顔面の神経障害、皮膚知覚障、アレルギー体質、皮膚病、及びアトピー性皮膚炎の方、敏感肌の方
- 骨折、整形などで顔面に埋め込み手術を受けた方
- 乳児、子供、お年寄りなど熱さを自覚できない方
- 交通事故などによる頭部および眼科的後遺症がある方
- 目の病気のある方、またはあった方
- 目の手術を行った方(レーシック手術直後の方はかかりつけの医師にご相談の上ご使用下さい)

△事故やトラブルを生じたり、症状が悪化し、最悪の場合失明の原因になります。

下記の場合は使用しないで下さい。

- 体調のすぐれないときや発熱している場合
- 肌に傷や湿疹、はれものなどがある場合
- 皮膚に異常のある場合

△肌や身体のトラブルの原因になります。

乳幼児及び子供の手の届く場所には保管せず、使用させないで下さい。ペットには使用しないでください。

△事故やケガの原因になります。

ぬれた手でコネクターや端子部分に触らないでください。

△感電やけがの原因になります。

妊娠中の方は使用しないで下さい。

△ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因になります。

湿気やほこりの多い場所で使用したり、保管しないで下さい。

また、水のかかりやすい所に置かないで下さい。

△感電や火災の原因になります。

分解、修理、改造はしないで下さい。

△火災・感電・けが・故障の原因になります。

本製品を水につけたり、水洗いしないで下さい。汚れが気になる場合は、清潔なタオルなどをお湯や水で濡らし固く絞って、優しくふき取ってください。

また、充電池およびUSBコードを水・海水・飲料・石鹼水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しないでください。

△感電やショートによる火災などの原因になります。

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下の車内など)で、保管・使用しないで下さい。

△発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。



注意

使用しない時は必ず電源を切り、長時間の加熱を避けて下さい。

△火災・故障の原因になります。

連続使用時間は30分間を超えないで下さい。

△ヤケドや肌トラブルの原因になります。

収納時にUSBコードを本体などに巻き付けないで下さい。

USBコードを抜くときは、コード部分を持たずに必ず先端部分を持って下さい。

△感電やショートによる火災などの原因になります。

本体を装着中は他の作業をしないで下さい。


△思わぬ事故につながります。

コネクタ部分、USBコード端子にピンなどの金属を差し込んだり、ごみを付着させたりしないでください。

- △感電やショートによる火災などの原因になります。
本体や充電機をたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力をあたえないでください。
- △ケガや故障の原因になります。
つけまつ毛は、必ずはずして下さい。
- △目を傷つけたり炎症の原因になります。
充電機およびUSBコードは付属のものを使用して下さい。
付属品は他の製品には使用しないで下さい。
- △故障や事故の原因になります。
睡眠時に遮光用のアイマスクとしてご使用される際には、電源をオフにして、充電機を取り外してからご使用ください。
長期間使用しないときは、充電機をフル充電してから保管し、1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。
- △長期間充電しないと充電ができなくなることがあります。

各部の名称

本体：表

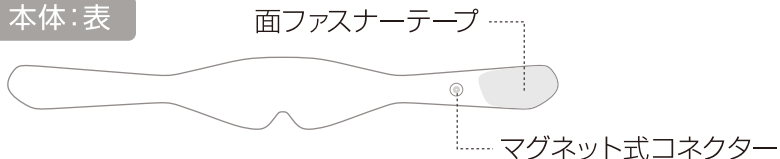

充電池：表



充電池：裏




商品仕様

ブランド	MYTREX EYE+(マイトレックスアイプラス)
本体寸法	約690×92mm
作業効率	5~8W
使用環境	温度 0℃~35℃、相対湿度 ≤85RH%
充電電池寸法	約50×40×15mm
充電電池入力	DC 5V 600mA
充電電池出力	DC 5V 1500mA
充電電池容量	800mAh

充電電池のLEDランプと状態

充電中	白色・点滅
充電完了	白色・点灯
加熱中	赤色・点灯
電源オフ時	消灯
残量低下時	赤色・点滅

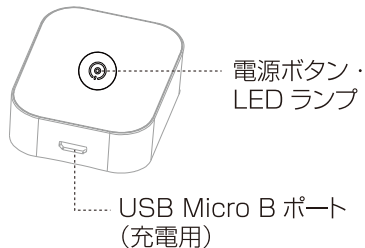

電池のリサイクルについて：

本製品は、リサイクル可能ナリチウムイオン電池を内蔵しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



充電方法

1. 電源をオフにして、アイマスクから充電池を取り外します。
2. 付属の USB コードの Micro B コネクター側を充電池の USB Micro B ポートに接続します。
3. USB コードの Type A コネクター側をお手持ちのパソコン等の USB ポート* に接続します。
 - 充電池の LED ランプ（白色）が点滅し、充電を開始します。
4. 充電が完了（白色ランプが点灯）したら、USB ケーブルを取り外します。


* 電源供給が可能なパソコン、モバイルバッテリー、AC アダプターの USB ポート (5V/1A 以上) をお使いください。

※充電にかかる時間は、約 2 時間です。満充電からの給電時間は、約 30 分間です。充電の残量や環境によって異なります。

使用方法

1

充電池の電源ボタンを長押しして、オンにします。
●LEDランプが赤色に点灯・1回振動します。

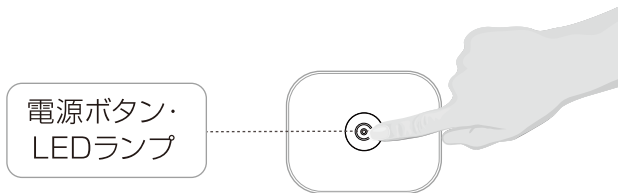

※初回ご使用時には、アイマスク表側の面ファスナーテープに保護シートが貼ってあります。剥がしてからご使用下さい。


※充電中に加熱機能を使用することはできません。

2

充電機のマグネット式コネクタをアイマスクのコネクター部に取り付けてから、頭に装着します。

- 赤色ランプ点灯後、すぐにアイマスクに取り付けてください。取り付けない場合、約4秒後に電源が切れます。

マグネット式コネクタ

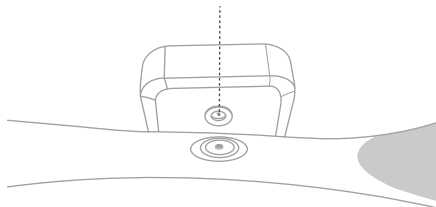

- ※電源をオフにするには、電源ボタンを長押しします(赤色ランプ消灯・2回振動)。
- ※アイマスクを折りたたむときは、初回梱包時のように三つ折りにします。アイマスク中央で折りたたむと、断線する恐れがあります。