


MYTREX RAKUNO LITE

取扱説明書

保管用

保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき、
誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使い下さい。
この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになった後も、大切に保管して下さい。

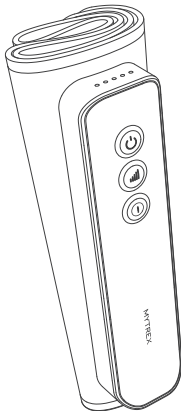

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止しカスタマーサポートへお問い合わせください。故障状態のまま使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

ご使用になる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

警告表示について

誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。



警告

誤った使い方をすると、「死亡や重傷を負うおそれがある」内容を示しています。



禁止

してはいけない「禁止」内容を示しています。



注意

誤った使い方をすると、「損傷を負う可能性や物的損害が発生するおそれがある」内容を示しています。



必ず守る

必ず実行して頂く「強制」内容を示しています。

警告



禁止

次の方は使用しない。

事故や症状を悪化させる原因になります。

●医師からマッサージを禁じられている方

例：血栓症、塞栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など

●脚部に重度の血行障害のある方

自分で意思表示のできない方や操作が行えない方には使用させない。

事故やけがの原因になります。

小さな子供に使用させない。本製品で遊ばせない。ペットには使用しない。

事故やけが、体調不良の原因になります。

ふくらはぎ以外に使用しない。首に使用しない。

事故やけがの原因になります。

警告



禁止

使用部位周辺にアクセサリなど硬いものをつけて使用しない。
事故やけがの原因になります。

自動車、自転車等の運転や他の作業をしながら使用しない。使用中に立ったり歩いたりしない。
事故やけがの原因になります。

本体を布団やこたつの中に入れて使用しない。タバコを吸いながら使用したり、暖房器具の近くやホットカーペットの上などで使用しない。
事故や感電、低温やけどの原因になります。

本体や付属品の差込口、すきまなどにピン、異物、ゴミ、水分を付着させない。
感電やショート、発火の原因になります。

警告



禁止

本商品はリチウム電池内蔵のため次のようなことは絶対しない。
発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。

- 加熱や火中投下
- 落下させたり強い衝撃を加えること
- 高温や低温環境でのご使用、充電、放置
- こたつや布団に入れてのご使用、充電、放置
- 車内など高温になる場所でのご使用、充電、放置

下記のような異常を感じた場合は直ちに使用を中止しカスタマーサポートまで相談する。

発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。

- 電池の膨張・異音・異臭
- 充電しても動作しない
- 極端に使用時間が短くなった
- 充電中に過度に熱くなる

警告



禁止

性能の劣化したリチウムイオン電池を使用しない。
発煙や発火、火災の原因になります。

USBコードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。また、重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
感電やショート、発火、故障の原因になります。

USBコードが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しない。
感電やショート、火災の原因になります。

USBコードを抜くときは先端部分を持ち、コードを引っ張らない。また、ぬれた手で抜き差しはしない。
感電やショート、発火の原因になります。

警告



禁止

本体の布部を故意に外したり、破いたり、切ったりしない。
事故や感電、けがの原因になります。



水場禁止

本体および付属品に水をかけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で使
用しない。
火災や感電、けがの原因になります。



分解禁止

分解や修理、改造をしない。
発火や故障、事故の原因になります。

警告



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やけが、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方
- 悪性腫瘍のある方
- 心臓疾患、心臓に障害のある方、血栓のある方
- 血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
- 妊娠中の方、出産直後の方
- 薬を服用中の方
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- 皮膚に創傷や湿疹、はれものなど異常ある方
- 温度感覚喪失が認められる方
- 安静を必要とする方、四肢の不自由な方

警告



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やけが、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状[けん怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期にある方、衰弱している方)
- 体調不良、身体に異常を感じている方
- 骨折、骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性疾患(疼痛性)のある方
- 背骨に異常のある方、背骨が左右に曲がっている方
- 腱鞘炎の方
- 医療機関で治療中の方
- かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方
- 体力が極端に衰えた方
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- 神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方

警告



必ず守る

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談する。
健康を害するおそれがあります。

本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止する。
破損や発火の原因になります。

使用前に本体の布部に破れが無いか確認し、破れがある場合は使用を中止する。

事故やけがの原因になります。

USBコードは付属品を使用する。

故障の原因になります。なお、付属品は他の商品には使用しないでください。

警告



必ず守る

万一機器に異常が発生したら直ちに使用を中止し、本体の電源をすぐに切る。また、充電中に機器に異常が発生したり、雷がなり始めたり停電したときは、直ちにコンセントからACアダプターを抜く。

事故や火災の原因になります。けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。

注意



禁止

用途以外の目的で使用しない。
けがや体調不良の原因になります。

次のようなときは使用しない。

事故やけが、体調不良の原因になります。

●疲労が激しい時 ●飲酒後

●食前、食後の1時間 ●睡眠中

●皮膚に異常のある時

乳幼児や子供の手の届くところで充電、使用、保管しない。

事故やけがの原因になります。

動作中、可動部に手や指を差し込まない。

けがの原因になります。

本製品は片足用のため両足を入れて使用しない。

事故やけがの原因になります。

注意



禁止

収納時にUSBコードを本体などに巻き付けない。

コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。

感電保護クラスⅡ(回)の定格出力DC5V/2AのACアダプター以外は使用しない。

故障や事故の原因になります。



必ず守る

使いはじめは5分程度をめどに弱い刺激で使用する。

けがや体調不良の原因になります。

1回の使用は10分以内とし、1日の使用は30分以内にする。

逆効果や体調不良の原因になります。なお、複数の方での連続使用はお控えください。

注意



必ず守る

電源タップを使用する際は、必ず定格容量を守る。

火災や焼損の原因になります。

充電時以外はUSBコードをコンセントから抜く。

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

故障や不具合が生じた場合は、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートに相談する。

お客様ご自身では分解や修理などをしないでください。保証の対象外となります。

セット内容

万一セット内容に不足がございましたら、カスタマーサポートまでご連絡下さい。

●本体(マイトレックス ラクーノ ライト)	1台
●USBコード	1本
●取扱説明書	1部

※本製品は左右兼用(片脚用)です。どちらの脚でもお使いいただけます。

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※デザインおよび仕様については、予告なしに変更することがあります。


※本製品は医療機器ではありません。

各部の名称


本体

面ファスナー(布表面)

表面

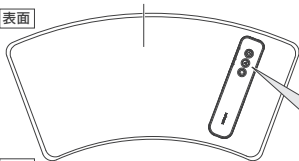


裏面

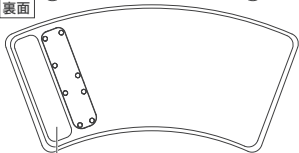


面ファスナー

操作部

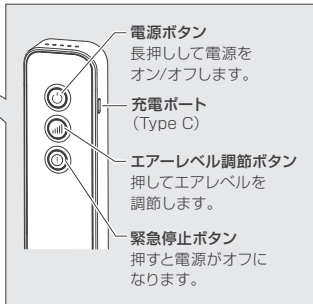

操作部

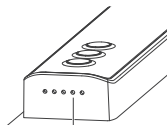

LEDランプ*

青色LED ランプ

エアーレベル表示

LED1	LED2	LED3	LED4	LED5
				
レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5

白色LED ランプ

充電残量表示(電源オン時*／充電中)



*充電残量は、本体の電源をオンにした際に約2秒間点滅する白色LEDの数で確認することができます。

ご使用の前に(充電方法)

初めてご使用されるときや、充電残量が減ったとき(充電残量ランプのLED1～5がすべて白色に点滅しているとき)は、本体の電源をオフにしてから充電してください。

●動作時間の目安*

充電時間	動作時間
約2時間半	約3時間

*動作時間は室温25℃・無負荷運転で使用した場合の目安です。充電時間や動作時間は、電池の残量や充電環境、使用環境によって大きく前後します。室温が低くなると(10℃以下)、動作時間が短くなる傾向があります。

※充電推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度外では充電時間がのびたり、充電しない場合があります。


※初めての充電や、長期間ご使用にならなかった後に充電される場合、電池持続時間が短い場合があります。何度か充電・使用を繰り返すと正常に戻ります。

1 本体の充電ポートに、付属の充電用USBコードのType Cコネクター側を接続する。

2 USBコードのType Aコネクター側を、ACアダプター(別売品)に接続する。

※市販品のACアダプターは、電気用安全法(PSEマーク)を取得しているACアダプターで、感電保護クラスⅡ(回)のACアダプターをご使用ください。また、定格出力DC5V/2AのACアダプターをご使用ください。

※パソコン等のUSBポートからも充電は可能ですが、一部のパソコン、モバイルバッテリーでは充電ができない場合があります。電源供給元を変更し、再度充電してください。急速充電器は故障の原因になるおそれがあるため、使用しないでください。

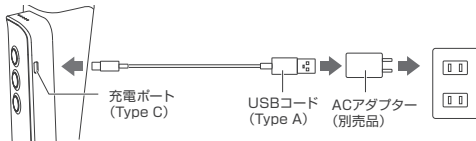

ご使用の前に(充電方法)

3

ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

●LED1～LED5が順に白色に点滅し、充電を開始します。

※LEDがつかない場合、正しく充電ができていません。充電方法の手順にしたがって正しく接続できているかご確認ください。

※充電中は、使用できません。

4

充電が完了(LED1～LED5が全て点灯)したら、ACアダプターをコンセントから抜く。

ご使用方法

注意


- ※使用前に本体の布部の生地破れがないかを確認してください。破れている場合は使用しないでください。
- ※初回ご使用前や、しばらく使用していなかった場合は、操作ボタンおよびタイマー(10分間)が正常に動作するか確認してください。
- ※肌に使用跡が付く場合があります。使用跡が気になる場合は靴下やズボンの上から装着するようにしてください。
- ※装着時に洋服やストッキングに面ファスナーがつかないようにご注意ください。

ご使用方法

ふくらはぎへの巻きかた

電源がオフになっていることを確認してから巻きつけてください。

- 1 | 本体内側の中央部分をふくらはぎの中心に合わせます。

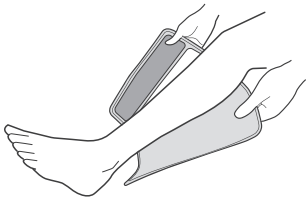


2

面ファスナーの端をもって、ふくらはぎに巻き付けます。

面ファスナーが浮かないようにしっかりとめてください。

※使用してみてきつすぎる場合はゆるめる、刺激が弱い場合は少し強めに巻きつけるなど、装着具合を調整できます。

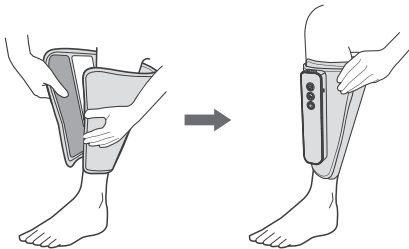

ご使用方法

ケアのしかた

- 1** | 電源ボタン()を長押しする。
●電源がオンになり、操作部上部のLEDランプ表示が青色に点灯します。
※デフォルトはエアーレベル1です。
※電源をオフにして、再度オンにすると前回のエアーレベルから開始します。(エアーレベル記憶機能付き)。
- 2** | エアーレベル調節ボタン()を押してエアーの強さを選ぶ。
※エアーレベルは5段階から選択できます。
※押すたびに「レベル1→レベル2→レベル3→レベル4→レベル5→レベル1→レベル2…」の順に切り替わります。
※使い始めは弱いレベルで使用し、使い慣れてから強さを調節してください。
- 3** | 使用中に電源をオフするには、()ボタンを長押しする。
※使い始めから10分間経つと、自動的に電源がオフになります。
※ただちに停止したい場合は、緊急停止ボタン()を押してください。

お手入れ方法

- お手入れは必ず動作が停止している状態で行ってください。
- 本体および付属品は絶対に水洗いしないでください。
- 本体および付属品の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。本体の汚れが気になる場合は、ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よくしぼってから本体表面(布部)の汚れを丁寧に拭き取ってください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

保管方法

- 使用しないときは本体の電源をオフにし、USBコードのねじれをほどいて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。電池の特性上、使用していなくても少しずつ放電するため、保管中でも充電残量は徐々に低下します。
- 長期間使用しないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないように保管してください。
- 保管する際は、右図のように折りたたんで保管してください(図1)。丸めた状態で保管すると、シワの原因となるおそれがあります。



図1

廃棄する場合は

本体にはリチウムイオン電池が内蔵されています。

廃棄の際は自治体の分別ルールに従って処分してください。条例の詳しい内容は、各自治体にお問い合わせください。

その他の付属品もお住いの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

充電電池について

- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。性能の落ちた電池を使用しないでください。(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。充放電可能回数の目安は300回～500回です。)
- 電池は交換には対応していません。

リチウムイオン電池内蔵製品の注意点は以下でご確認いただけます。

<https://mytrex.jp/support/safety/battery/>

本製品(本体)はリチウムイオン電池を内蔵しています。

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



Li-Ion

故障かな?と思ったら

お問い合わせの前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートにご連絡ください。絶対に分解したり、修理や改造はしないでください。

症状	確認していただくこと
動かない	・充電量不足ではありませんか? →充電してください。
突然停止した	・緊急停止ボタンを押していませんか? →緊急停止ボタンを押すと電源がオフになります。故障ではありません。再度使用する際は、電源をオンにしてからご使用ください。 ・充電量不足ではありませんか? →充電してください。 ・電源ボタンを押してから約10分経過するとタイマーにより自動で停止します。故障ではありません。

症状	確認していただくこと
異音がする 音が大きい	・動作音は構造上発生するものですので、異常ではありません。
充電できない	・ACアダプター(別売品)、USBコードを正しくつないでいますか？ →接続方法を確認してください。 ・高温時や低温時は充電できないことがあります。 →推奨環境温度の場所で充電してください。

製品仕様

ブランド	MYTREX(マイトレックス)
販売名	RAKUNO LITE(ラクーノ ライト)
型番	MT-RKL-25B(ブラック)
使用電源	5V= 2A(回マークが記載されているものに限る)
定格消費電力	5W
バッテリー	リチウムイオン電池 3.6V= 2600mAh
サイズ	展開時:約280mm×575mm×30mm 折畳時:約240mm×90mm×70mm
質量	約375g
動作持続時間*	約3時間

素 材	ABS+PC、シリコン、ナイロン
対 応 サ イ ズ	ふくらはぎ周り:50cmまで
使 用 環 境	温度:5℃～40℃、相対湿度:≤85%RH
定 格 時 間	10分
製 造 販 売 元	株式会社 創通メディカル
製 造 国	中国

*測定環境:室温25℃(無負荷運転時)。実際の時間は、使用環境や使用状況により異なります。

MYTREX

発売元：株式会社創通メディカル

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10-5F

<https://mytrex.jp>

©2025 SOTSU MEDICAL CO., LTD.

202500KB