


MYTREX RAKU-NO NOW

取扱説明書

保管用

保証書付

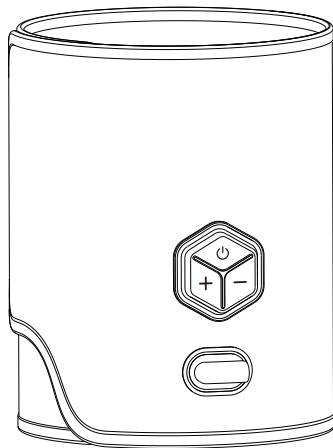

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになった後も、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止しカスタマーサポートへお問い合わせください。故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

ご使用になる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

警告表示について

誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。



警告

誤った使い方をすると、「死亡や重傷を負うおそれがある」内容を示しています。



禁止

してはいけない「禁止」内容を示しています。



注意

誤った使い方をすると、「損傷を負う可能性や物的損害が発生するおそれがある」内容を示しています。



必ず守る

必ず実行して頂く「強制」内容を示しています。

警告



禁止

次の方は使用しない。

事故や症状を悪化させる原因になります。

●医師からマッサージを禁じられている方

例：血栓症、塞栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など

●脚部に重度の血行障害のある方

自分で意思表示のできない方や操作が行えない方には使用させない。

事故やけがの原因になります。

小さな子供に使用させない。本製品で遊ばせない。ペットには使用しない。

事故やけが、体調不良の原因になります。

足のケア以外の目的で使用しない。首に使用しない。

事故やけがの原因になります。

警告



禁止

使用部位周辺にアクセサリなど硬いものをつけて使用しない。
事故やけがの原因になります。

自動車、自転車等の運転や他の作業をしながら使用しない。使用中
に立ったり歩いたりしない。
事故やけがの原因になります。

本体を布団やコタツの中に入れて使用しない。タバコを吸いながら使用
したり、暖房器具の近くやホットカーペットの上などで使用しない。
事故や感電、低温やけどの原因になります。

本体や付属品の差込口、すきまなどにピン、異物、ゴミ、水分を付着
させない。
感電やショート、発火の原因になります。



警告



禁止

ACアダプターおよび電源コードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。また、重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。

感電やショート、発火、故障の原因になります。

ACアダプターおよび電源コードが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しない。

感電やショート、火災の原因になります。

ACアダプターおよび電源コードを抜くときは先端部分を持ち、コードを引っ張らない。また、ぬれた手で抜き差しはしない。

感電やショート、発火の原因になります。

本体の布部を故意に外したり、破いたり、切ったりしない。

事故や感電、けがの原因になります。



警告



水場禁止

本体および付属品に水をかけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。

火災や感電、けがの原因になります。



分解禁止

分解や修理、改造をしない。

発火したり、故障や事故の原因になります。

警告



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やけが、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方
- 悪性腫瘍のある方
- 心臓疾患、心臓に障害のある方、血栓のある方
- 血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
- 妊娠中の方、出産直後の方
- 薬を服用中の方
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- 皮膚に創傷や湿疹、はれものなど異常ある方
- 温度感覚喪失が認められる方
- 安静を必要とする方、四肢の不自由な方

警告



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やけが、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状[けん怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期にある方、衰弱している方)
- 体調不良、身体に異常を感じている方
- 骨折、骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性疾患(疼痛性)のある方
- 背骨に異常のある方、背骨が左右に曲がっている方
- 腱鞘炎の方
- 医療機関で治療中の方
- かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方
- 体力が極端に衰えた方
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- 神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方



警告



必ず守る

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談する。

健康を害するおそれがあります。

本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止する。

破損や発火の原因になります。

使用前にカバーの生地に破れが無いか確認し、破れがある場合は使用を中止する。

事故やけがの原因になります。

電源は交流用100V専用コンセントを使用する。

火災やけがの原因になります。



警告



必ず守る

ACアダプターは付属品を使用する。

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。なお、付属品は他の商品には使用しないでください。

ACアダプターは、タコ足配線にせず壁のコンセントに直接差し込む。
火災や感電、故障の原因になります。

万一機器に異常が発生したら直ちに使用を中止し、本体の電源をすぐに切る。また、雷がなり始めたり停電したときは、直ちにコンセントからACアダプターを抜く。

事故や火災の原因になります。けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。

注意



禁止

用途以外の目的で使用しない。

けがや体調不良の原因になります。

次のようなときは使用しない。

事故やけが、体調不良の原因になります。

●疲労が激しい時 ●飲酒後

●食前、食後の1時間 ●睡眠中

●皮膚に異常のある時

乳幼児や子供の手の届くところで使用、保管しない。

事故やけがの原因になります。

動作中、可動部に手や指を差し込まない。

けがの原因になります。

本製品は片足用のため両足を入れて使用しない。

事故やけがの原因になります。

注意



禁止

収納時に電源コードを本体などに巻き付けない。

コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。



必ず守る

使いはじめは5分程度をめどに弱い刺激で使用する。

けがや体調不良の原因になります。

1日の使用時間は片足10分以内をめどに使用する。

逆効果や体調不良の原因になります。なお、複数の方での連続使用はお控えください。

電源タップを使用する際は、必ず定格容量を守る。

火災や焼損の原因になります。

注意



必ず守る

使用時以外はACアダプターをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電や漏電、火災の原因になります。

故障や不具合が生じた場合は、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートに相談する。

お客様ご自身では分解や修理などをしないでください。保証の対象外となります。

セット内容

万一セット内容に不足がございましたら、カスタマーサポートまでご連絡下さい。

- 本体(マイトレックス ラクーノ ナウ).....1台
- 専用ACアダプター1個
- 取扱説明書1部

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。


※デザインおよび仕様については、予告なしに変更することがございます。

※本製品は医療機器ではありません。

各部の名称

本体

操作部

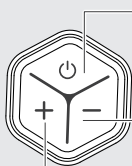

()ボタン・
LEDランプ

長押しして電源を
オン/オフします。


(-)ボタン

押すたびにエアーの
レベルを下げます。

(+)ボタン


押すたびにエアーの
レベルを上げます。

電源コネクター

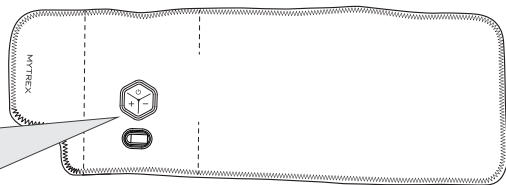

取付目印タグ

面ファスナー

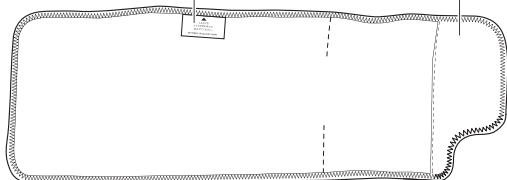


左右兼用 どちらの脚でもお使いいただけます。

※本製品は片脚用です。

各部の名称

付属品

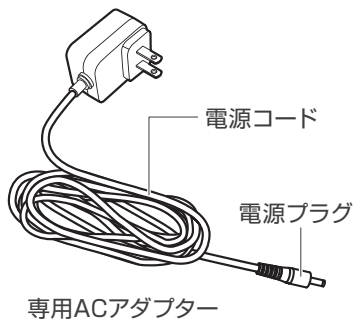


ご使用の前に

使用前の準備

- 1 | 専用ACアダプターの電源プラグを本体側の電源コネクタに接続する。
※外れないようにしっかりと差し込んでください。

- 2 | ACアダプターをコンセントに差し込む。

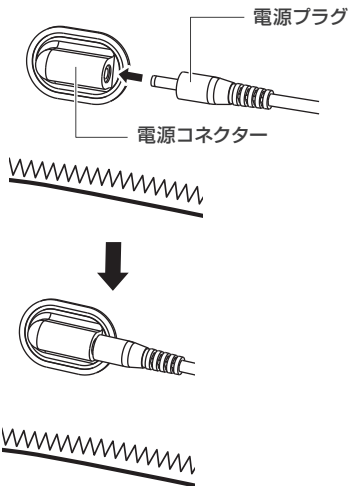


ご使用の前に

巻き方

電源がオフになっていることを確認してから巻きつけてください。取付目印タグがある面を肌に向け、取付目印タグをふくらはぎの中心に合わせます。

面ファスナーが浮かないようにしっかりとめてください。


※使用してみてきつすぎる場合はゆるめたり、刺激が弱い場合は多少強く巻きつけたりするなど調整することができます。

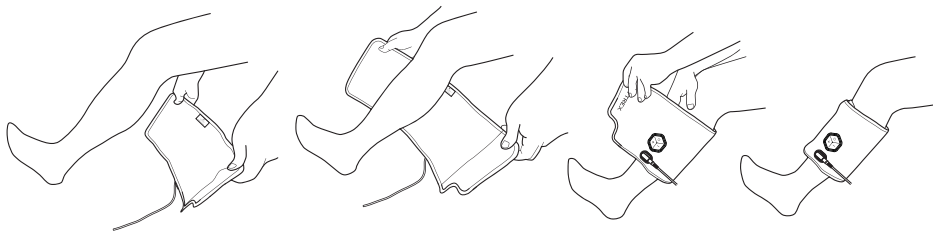


使用例

ふくらはぎ、足の裏にご使用いただけます。

ふくらはぎ

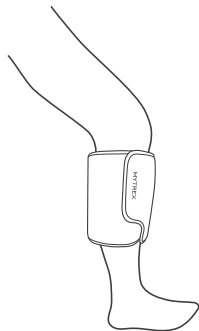

足の裏

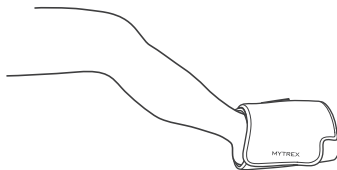

ご使用方法



- ※使用前にカバーの生地破れがないかを確認してください。破れている場合は使用しないでください。
- ※初回で使用前や、しばらく使用していなかった場合は、操作ボタンおよびタイマー（10分間）が正常に動作するか確認してください。
- ※肌に使用跡が付く場合があります。使用跡が気になる場合は靴下やズボンの上から装着するようにしてください。
- ※装着時に洋服やストッキングに面ファスナーがつかないようにご注意ください。

1

（) ボタンを長押しする。

●電源がオンになり、LEDランプ表示が点灯します。

※デフォルトはエアレベル1です。

ケアのしかた

2

(+ / -) ボタンを押してエアーの強さを調整する。

※エアーレベルは5段階から選択できます。

※使い始めは弱いレベルで使用し、使い慣れてから強さを調節してください。

エアーレベル	LED色
レベル1	水色
レベル2	青
レベル3	緑
レベル4	黄
レベル5	赤

3

使用中に電源をオフするには、(O) ボタンを長押しする。

※使い始めから10分間経つと、自動的に電源がオフになります。

お手入れの方法

- お手入れは必ず動作が停止している状態で行ってください。
- 本体および付属品は絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れが気になる場合は、ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よくしぼってから本体表面(布部)の汚れを丁寧に拭き取ってください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

保管の方法

- 使用しないときは本体の電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜き、電源コードのねじれをほどいて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないように保管してください。

廃棄する場合は

廃棄の際は自治体の分別ルールに従って処分してください。条例の詳しい内容は、各自治体にお問い合わせください。

故障かな?と思ったら

お問い合わせの前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートにご連絡ください。絶対に分解したり、修理や改造はしないでください。

症状	確認していただくこと
動かない	・ACアダプターを正しく接続していますか？ →ACアダプターの電源プラグを本体側の電源コネクターに、ACアダプターをコンセントにしっかりと差し込んでください。
突然停止した	・電源ボタンを押してから約10分経過するとタイマーにより自動で停止します。故障ではありません。
異音がする 音が大きい	・動作音は構造上発生するものですので、異常ではありません。

製品仕様

ブランド	MYTREX(マイトレックス)
販売名	RAKUNO NOW(ラクーノ ナウ)
型番	MT-RKN-25BR(ブラウン)、MT-RKN-25BG(ベージュ)、MT-RKN-25P(ピンク)
定格電源	5V $\equiv$ 1A
定格消費電力	4W
ACアダプター	100-240V $\sim$ 50/60Hz 0.2A
サイズ	約220mm×590mm×28mm
質量	約370g(ACアダプターを含む)
電源コードの長さ	約2m
素材	ナイロン、ポリエステル、シリコン

製品仕様

対 応 サ イ ズ	ふくらはぎ周り:約28～52cm
使 用 環 境	温度:5℃～40℃、相対湿度:≤85%RH
定 格 時 間	10分
製 造 販 売 元	株式会社 創通メディカル
製 造 国	中国

MYTREX

発売元：株式会社創通メディカル
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10-5F
<https://mytrex.jp>

©2025 SOTSU MEDICAL CO., LTD.

202500KB