


..... MYTREX
REBIVE
取扱説明書

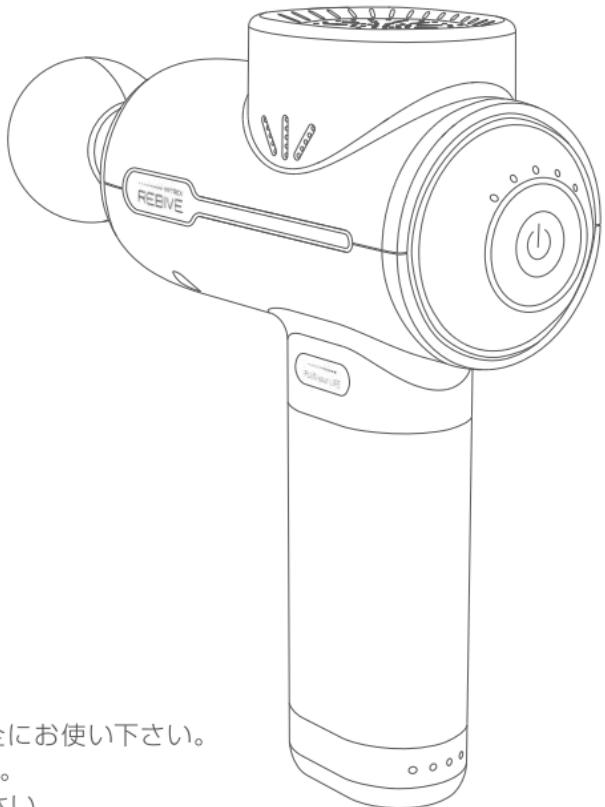

保管用

保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき、
誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。
この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

ご使用前に必ずご確認ください

万一、セット内容に不足がございましたら、カスタマーサービスまでご連絡下さい。

セット内容

- 本体(マイトレックス リバイブ) 1台
- 充電用USBコード 1本
- ACアダプター 1個
- アタッチメント 5種類
- 取扱説明書 1部
- 収納ケース 1個
- アタッチメント用ストッパーゴム(予備) 1個

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※本製品は一般家庭用です。医療機器ではありません。

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止しカスタマーサービスへお問い合わせください。故障状態のままで使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。



危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器



警告



禁止

視覚障害のある方は1人で使用しない。

けがや体調不良の原因になります。



禁止

他の機器と同時に使用しない。
けがや体調不良の原因になります。

 警告

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やけが、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 悪性腫瘍のある方
- 心臓疾患、心臓に障害のある方、血栓のある方
- 血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
- 薬を服用中の方、妊娠中の方、出産直後の方
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- 肌に傷や湿疹、はれものなど異常ある方
- 安静を必要とする方、四肢の不自由な方
- 発熱している方
- 体調不良、身体に異常を感じている方
- 骨折、骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性疾患(疼痛性)のある方
- 背骨に異常のある方、背骨が曲がっている方
- 医療機関で治療中の方
- かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方
- 体力が極端に衰えた方
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- 神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体质、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方



必ず守る



警告



必ず守る

使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。
医師に相談のうえ指示に従ってください。



禁止

腹部や胸部、頭部、首、ひじ、ひざ、背骨などの骨部には使用しない。
事故やけが、体調不良の原因になります。



禁止

子供に使用させない。本製品で遊ばせない。ペットには使用しない。
事故やけが、体調不良の原因になります。



禁止

乳幼児や自分で意思表示できない方には使用しない。また、乳幼児や子供の手の届くところで使用、保管しない。
事故やけが、体調不良の原因になります。



禁止

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。
事故やけが、体調不良の原因になります。
例)血栓症、塞栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など



禁止

本製品の専用アタッチメント以外は使用しない。
事故やけがの原因になります。



警告



禁止

付属品や本体の差込口、すきま、通気孔などにピン、異物、ゴミ、水分を付着させない。
感電やショート、発火の原因になります。



禁止

ACアダプターやUSBコードを抜くときは、先端部分を持ち、コードを引っ張らない。また、ぬれた手で抜き差しはしない。
感電やショート、発火の原因になります。



禁止

本体および付属品を水につけたり、水洗いしない。また、ぬれた身体に使用しない。
感電、ショート、発火、故障の原因になります。



禁止

ACアダプターおよびUSBコードが傷んだり、差しこみがゆるいときは使用しない。
感電やショート、発火の原因になります。



必ず守る

本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止する。
破損・発火の原因になります。



必ず守る

本体は必ず手に持つて使用する。
本体の上にのったり、座ったりして使用しないでください。転倒による事故やけが、故障の原因になります。



警告



禁止

ACアダプターおよびUSBコードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。
また、重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
感電、ショート、発火、故障の原因になります。



禁止

高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で、保管・使用しない。加熱したり、火中に投下しない。
発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。



水場禁止

本体および付属品に水をかけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。
火災や感電、けがの原因になります。



必ず守る

万一、異常が発生したら、本体の電源をすぐに切る。充電中の場合は、コンセントからACアダプターをすぐに抜く。
けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



分解禁止

分解や修理、改造をしない。
発火したり、故障や事故の原因になります。



必ず守る

交流100V～240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
火災・感電・故障の原因となります。



注意



必ず守る

1回の使用時間は10分以内を目安とする。また、同一箇所への連続使用は3分以内を目安とする。筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、けがをまねくことがあります。

なお、複数の方が使用する場合は、連続使用の合計時間は1時間以内にしてください。最低30分間以上は機器を停止させてから、再度ご使用ください。本体が熱くなつて、故障の原因になります。



禁止

使用中、通気孔をふさがない。発火や故障、事故の原因になります。



必ず守る

はじめは短い時間で使用する。強い刺激に慣れていないとけがの原因になります。



禁止

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。事故やけが、故障の原因になります。



禁止

不安定な場所で保管しない。また、本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしない。けがや本体が破損、故障する原因になります。



注意



必ず守る

使用中、髪や指などが巻き込まれないようにする。
事故やけがの原因になります。



禁止

強く押しつけて使用しない。
事故やけが、皮膚や筋肉を傷める原因になります。



禁止

次のようなときは使用しない。
●疲労が激しい時 ●飲酒後
●食前、食後の1時間 ●睡眠中
●皮膚に異常のある時

事故やけが、体調不良の原因になります。



禁止

肌の弱い方は素肌で使用しない。
体調不良の原因になります。



必ず守る

本製品を使用するときは、アクセサリー類を外す。
事故やけがの原因になります。



禁止

収納時にUSBコードを本体などに巻き付けない。

コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。




禁止

ACアダプターおよびUSBコードは付属品を使用する。付属品は他の製品には使用しない。
故障や事故の原因になります。

各部の名称

本体

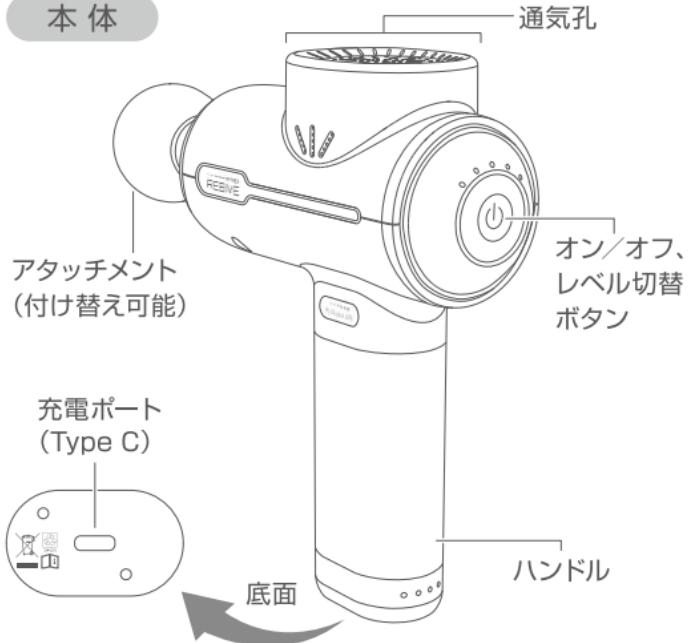

ご使用の前に(充電方法)

初めてご使用されるときや、充電残量が減ったとき(充電残量ランプのLED1が点滅時)は、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3時間	約2時間

●充電残量ランプについて



※充電推奨温度は15°C～35°Cです。推奨温度外では充電時間が伸びたり、充電しない場合があります。

※電池の残量、充電環境および使用環境によって、充電時間や動作時間は大きく前後します。


※初めての充電や、長期間ご使用にならなかつた後に充電される場合、電池持続時間が短い場合があります。

何度か充電・使用を繰り返すと正常に戻ります。

1

本体底面の充電ポートに、付属の充電用USBコードのType Cコネクター側を接続する。

※端子の形が一致するように差し込んでください。

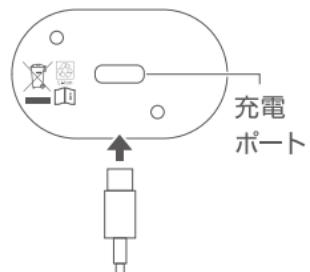

2

USBコードのType Aコネクター側を、付属のACアダプターに接続する。

※付属のACアダプターの規格は5V/2Aです。2A未満のアダプター等をご使用の場合、充電に長時間かかる場合があります。

※パソコンのUSBポートからも充電は可能ですが、一部のパソコンでは、電力が不足する場合があります。うまく充電ができない場合は、電源供給元を変更し再度充電してください。

3

ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

●LED1～LED4が順に点灯し、充電を開始します。

※LED1～LED4がつかない場合、または一斉に点滅する場合、正しく充電ができていません。充電方法の手順にしたがって正しく接続できているかご確認ください。

※充電中は、本体の電源をオンにしないでください。

4

充電が完了(LED1～LED4が全て点灯)したら、
ACアダプターをコンセントから抜く。

充電池について

●充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。充放電可能回数の目安は300回～500回です。)●電池は交換には対応していません。●長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を内蔵しています。本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



Li-ion


ご使用方法

1

電源がオフになっていることを確認して、アタッチメントを取り付ける。

※奥までしっかりと差し込んでください。

※U字形アタッチメントのみ、下図のように取り付けます。(アタッチメントの突起を本体側差込口のくぼみに合わせて、まっすぐに差し込んでください。)

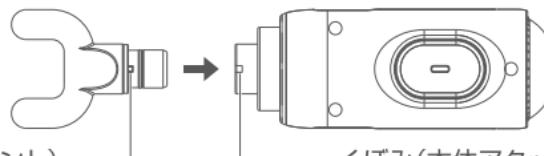

突起(U字形アタッチメント)

くぼみ(本体アタッチメント差込口下側)

アタッチメント使用例



球形

太腿や背部、臀部などの大きな筋肉に。



円柱形

足裏など、ピンポイントに刺激したいときに。



平形

ふくらはぎをはじめ、あらゆる部位に面で刺激。



緩衝形

柔らかめの刺激で、肩などの筋肉に。



U字形

前腕や脊柱、アキレス腱の両側などの筋肉に。

| 2 |

オン／オフ、レベル切替ボタン(④)を約2秒間押して電源をオンにする。

※充電残量ランプが点灯しているときは、(④)ボタンを短く1回押して電源をオンにします。

- 振動レベル表示ランプが1つ点灯し、振動レベル1から開始します。




| 3 |

(④)ボタンを押して、振動レベルを選ぶ。

※ボタンを押すたびに、振動レベルが1レベルずつ上がります。振動レベルは、5段階(レベル1～5)から選べます。振動レベル表示ランプの点灯数で、どの振動レベルに設定されているかを確認することができます。

- 例)** 振動レベル表示ランプが3つ点灯している場合、振動レベル3に設定されています。

振動レベル	1分あたりの回転数
1	2100回
2	2400回
3	2700回
4	3000回
5	3300回

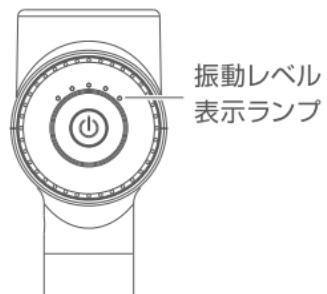

4

ハンドル部分をしっかりと手で持ち、肌に軽く当てて使用する。

※1回の使用時間は10分以内を目安としてください。また、同一箇所への連続使用は3分以内を目安としてください。

※「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

5

使用中に振動を停止するには、(④)ボタンを約2秒間押す。または、振動レベル5の状態から、(④)ボタンをもう1回押して停止させることもできます。

6

振動停止の状態で、(④)ボタンを約2秒間押して、電源をオフにする。

※振動停止の状態が約20秒間続いた場合や、使い始めから10分間経った場合も、自動的に電源がオフになります。

お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- 本体および付属品は絶対に水洗いしないでください。
- 本体およびアタッチメントの汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。汚れが気になる場合は、ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よくしぼってから本体表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。アタッチメントのストッパーゴム部分にオイル等が付着していると、アタッチメントが外れやすくなる場合があります。ストッパーゴム部分も同様に拭き取ってお手入れしてください。
- アタッチメント差込口付近にオイルがにじみ出ることがありますが、機器内の潤滑油によるもので、本体の異常ではありません。乾いた布などで拭き取ってお手入れをしてください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

保管のしかた

- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないておくと充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体およびアタッチメントのお掃除をしてから、付属の収納ケースに保管してください。

製品仕様

ブ ラ ン ド	MYTREX (マイトレックス)
品 名	REBIVE (リバイブ)
ACアダプター	入力:AC100-240V、50/60Hz 出力:DC5V、2.0A
消 費 電 力	約25W (充電時)
オフタイマー	約10分
本体 サイズ	約147mm×60mm×189mm(アタッチメント除く)
バッテリー	2500mAh、7.4V ■■
使 用 環 境	温度 5°C~40°C、相対湿度 ≤85RH%

Standard Practice No.: Q/91510108629517429X-11-2019

※デザインおよび仕様については、予告なしに変更することがございます。