

MYTREX

REBIVE MINI XS

専用ハリ形アタッチメント

取扱説明書

保管用

保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

| ご使用前に必ずご確認ください

万一、セット内容に不足がございましたら、カスタマーサポートまでご連絡下さい。

セット内容

- ・リバイブミニXS専用ハリ形アタッチメント 1個
- ・専用バネ 6本* (銀色:3本、黒色:3本)

* 出荷時に銀色のバネ1本を本体に格納済みです。本製品には2種類のバネを付属しています。お好みに合わせて銀色(刺激圧力:普通)、または黒色(刺激圧力:強め)をお選びください。バネ交換のしかたは、7ページをご参照ください。(バネは消耗品です。)

※本製品は、別売品のマイトレックスリバイブミニXS(MT-RMXS21)専用のアタッチメントです。その他の製品には使用できませんので、ご注意ください。

※マイトレックスリバイブミニXS本体、ACアダプター、USBコードは本セット内容の構成品に含まれません。

※製品に関する安全上のご注意については、本体の取扱説明書をご参照ください。

各部の名称



ご使用方法

1

リバイブミニXS本体の電源がオフになっていることを確認して、ハリ形アタッチメントを取り付ける。
※奥までしっかりと差し込んでください。

2

本体の(①)ボタンを長押し(約3~5秒)して電源をオンにする。

3

刺激したい部位にハリ部を垂直に当てる。
※使用後は、本体からアタッチメントを取りはずして保管してください。

肌への当て方と注意事項



必ず振動
レベル1
または2で使用

髪の毛など
巻き込まない
ように注意

※ケガや故障の原因になりますので、無理な力をかけて強く押し付けないでください。頭皮やお顔にもご使用いただけますが、目や目のすぐ近くを避けて軽くあてるようにし、なぞるように使用してください。

※頭皮・顔全体で3分以内を目安としてご使用ください。首や肩に使う場合も、1回の使用時間の合計が10分を超えないようにしてください。

※異常を感じたときは直ちに使用をやめてください。

※使用後、刺激により一時的に肌が赤くなることがございます。時間がたつと薄くなるので問題はございませんが、症状が回復しない場合は専門医にご相談ください。

※使用後、ハリ形アタッチメントが熱くなる場合があります。必ず振動レベル1または2で使用し、1回の使用時間の合計が10分間を超えないようにしてください。また、連続使用を避け、使用後は数時間あけるようにしてください。

おすすめの使い方①

部位に応じて、「線(→)」または「点(●)」でケアします。

→ : 矢印に沿って、流すようにハリ部を当てる

● : ポイントに約5～10秒間ハリ部を当てる


※ 同一箇所を長時間刺激すぎないでください。振動レベル1または2で使用し、頭と顔全体で約3分間を目安としてください。

お顔のリフトケア*

リフトケアに効果的な表情筋を刺激します。

1. 額～髪の生際
2. 眉間、眉頭
3. 目元
4. ほうれい線～頬
5. あご～口元


*機器を上に向かって動かすこと

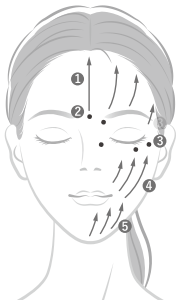

| おすすめの使い方②

顎まわりを休めるケア

力の入りやすい顎まわりを緩め、柔軟に保ちます。

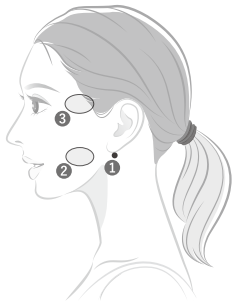

1. 耳の下のくぼみ

※斜め後ろから鼻先方向に向かってハリ部を当てます。

2. 耳下部の前方

3. 耳上部の前方




使用できない部位
鼻、耳、くちびる、まぶた、目のまわり、のどぼとけ
(上記の●部位)

| おすすめの使い方③

頭皮・首肩のケア

固まりがちな頭皮や首をケアします。

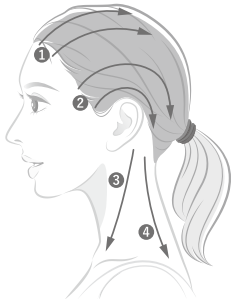

1. 髪の生際～後頭部
2. 耳上～首の付け根
3. 耳の後ろ～鎖骨(胸鎖乳突筋)
4. 首の付け根～肩・背中(僧帽筋)

バネ交換のしかた

本製品には2種類のバネを付属しています。お好みに合わせて銀色(刺激圧力:普通)、または黒色(刺激圧力:強め)をお選びください。本製品に使用されているバネは消耗品です。バネが緩くなった場合は、以下の手順で交換してください。

- 1 バネ格納部をまわして取りはずす。



- 2 バネを取り出し、新しいバネを格納する。
※ハリ部が外れないようにご注意ください。



- 3 バネ格納部をまわして取り付ける。
※止まるまでしっかりと回してください。

お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- 本体は絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。本体のストッパーゴム部分に、機器内の潤滑油等が付着していると本体が外れやすくなる場合があります。ストッパーゴム部分も同様に拭き取ってお手入れしてください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

保管のしかた

- 高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

製品仕様

製品仕様

| | |
|------|-----------------------------|
| ブランド | MYTREX (マイトレックス) |
| 品名 | REBIVE MINI XS専用 ハリ形アタッチメント |
| サイズ | 約15×58×15mm |
| 質量 | 約11g |
| 材質 | ステンレス鋼、アルミニウム合金、シリコン |
| 使用環境 | 温度:5°C~35°C、湿度:≤90% |

MYTREXカスタマーサポート

営業時間 9:00～17:30

(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

[電話でのお問い合わせ]

092-260-7366

[WEBでのお問い合わせ]

<https://mytrex.jp/support/>

